



Preserve Flow.
Advance Care.

The Only
FDA
APPROVED
Iliac Branch
Solution

*La soluzione con Branch Iliaco che
riscuote la fiducia dei medici e su
cui i pazienti possono contare.*

GORE
EXCLUDER®
ILIAC BRANCH
ENDOPROSTHESIS

La soluzione che elimina i dubbi sul salvataggio dell'ipogastrica.

- Range di trattamento dell'arteria iliaca interna di 6,5-13,5 mm
- Range di trattamento dell'arteria iliaca esterna di 6,5—25 mm
- Indicata per l'uso in combinazione con l'endoprotesi GORE® EXCLUDER® AAA





Oltre 5.000 endoprotesi GORE® EXCLUDER® Iliac Branch sono state impiantate dal conferimento del marchio CE nel 2013. È progettata appositamente per preservare il flusso ematico alle arterie iliache interna ed esterna ed è la prima protesi con branch iliaco approvata negli Stati Uniti.

- Sistema All-in-One progettato esclusivamente per l'uso nelle arterie iliache
- Gate per l'iliaca interna pre-incannulato e rilascio bifemorale per facilità d'uso
- Sistema di inserimento a basso profilo (16 Fr) per facilitare l'accesso vascolare e aumentare la trackability
- Rilascio riposizionabile a due fasi per il posizionamento accurato della componente iliaca
- Basata sul design e l'esperienza acquisiti da oltre 20 anni e 300.000 pazienti trattati* con la protesi GORE® EXCLUDER®

** Numeri basati sul numero di tronchi principali distribuiti.*

Pervietà dell'iliaca con esclusione dell'aneurisma



Pre-impianto



Follow-up a sei mesi

Immagine per cortese concessione di Sharif Ellozy, MD e Darren Schneider, MD, New York Presbyterian / Weill Cornell Medical Center; New York, New York.

Dati derivati dagli studi clinici negli Stati Uniti¹

- 0% Claudicatio glutea
- 0% Disfunzione erettile di nuovo esordio
- 0% Allargamento dell'aneurisma (> 5 mm)
- 100% Pervietà - arteria iliaca esterna
- 95% Pervietà - arteria iliaca interna
- 98,4% Assenza di reinterventi

Dati derivati dal Global Registry for Endovascular Aortic Treatment (GREAT)²

- 100% Sopravvivenza dell'intervento
- 0% Mortalità
- 100% Pervietà dell'arteria iliaca esterna (a 6 mesi)
- 0% Reintervento correlato alla pervietà dell'arteria iliaca interna
- 98% Assenza di reinterventi
- 0% Casi di claudicatio glutea segnalati
- 0% Casi di disfunzione sessuale segnalati
- 0% Rottura dell'aorta
- 0% Conversione alla chirurgia open


¹ Fino al follow-up a sei mesi.

² Cinquantotto pazienti arruolati in Europa e Australia fino al marzo 2016. Dati fino al follow-up a sei mesi, salvo diversamente indicato. Successo tecnico: nessun problema con la protesi segnalato come evento avverso serio correlato agli elementi della definizione tecnica.

Primo sistema completo³

Componente con branch iliaco e branch per iliaca interna usati in combinazione con l'endoprotesi GORE® EXCLUDER® AAA

- Tronco principale dell'endoprotesi
- Branca controlaterale
- Estensione iliaca
- Estensione aortica

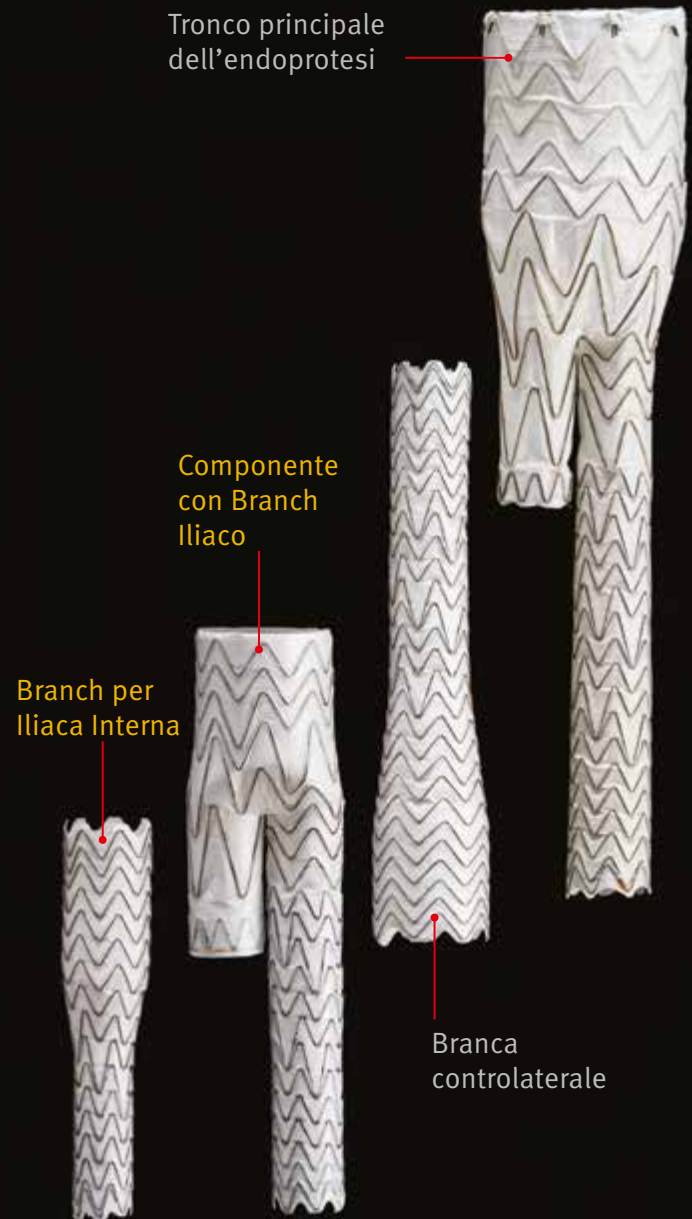

³ Gore ha progettato le componenti con branch iliaco ed il branch per iliaca interna.

Endoprotesi GORE® EXCLUDER® AAA

Tronco principale dell'endoprotesi

NUMERO DI CATALOGO DEL SISTEMA DI POSIZIONAMENTO GORE® C3® DI CATALOGO	DIAMETRO AORTICO INTERNO (mm)	DIAMETRO ENDOPROTESI AORTICA (mm)	DIAMETRO ILIACO INTERNO (mm)	DIAMETRO ENDOPROTESI ILIACA (mm)	LUNGHEZZA COMPLESSIVA DELLA PROTESI (cm)	MISURA RACCOMANDATA INTRODUTTORE (Fr)
RLT231212	19-21	23	10-11	12	12	16
RLT231214	19-21	23	10-11	12	14	16
RLT231216	19-21	23	10-11	12	16	16
RLT231218	19-21	23	10-11	12	18	16
RLT231412	19-21	23	12-13,5	14,5	12	16
RLT231414	19-21	23	12-13,5	14,5	14	16
RLT231416	19-21	23	12-13,5	14,5	16	16
RLT231418	19-21	23	12-13,5	14,5	18	16
RLT261212	22-23	26	10-11	12	12	16
RLT261214	22-23	26	10-11	12	14	16
RLT261216	22-23	26	10-11	12	16	16
RLT261218	22-23	26	10-11	12	18	16
RLT261412	22-23	26	12-13,5	14,5	12	16
RLT261414	22-23	26	12-13,5	14,5	14	16
RLT261416	22-23	26	12-13,5	14,5	16	16
RLT261418	22-23	26	12-13,5	14,5	18	16
RLT281212	24-26	28,5	10-11	12	12	18
RLT281214	24-26	28,5	10-11	12	14	18
RLT281216	24-26	28,5	10-11	12	16	18
RLT281218	24-26	28,5	10-11	12	18	18
RLT281412	24-26	28,5	12-13,5	14,5	12	18
RLT281414	24-26	28,5	12-13,5	14,5	14	18
RLT281416	24-26	28,5	12-13,5	14,5	16	18
RLT281418	24-26	28,5	12-13,5	14,5	18	18
RLT311413	27-29	31	12-13,5	14,5	13	18
RLT311415	27-29	31	12-13,5	14,5	15	18
RLT311417	27-29	31	12-13,5	14,5	17	18
RLT351414	30-32	35	12-13,5	14,5	14	18
RLT351416	30-32	35	12-13,5	14,5	16	18
RLT351418	30-32	35	12-13,5	14,5	18	18

Branca controlaterale

NUMERO DI CATALOGO	DIAMETRO ILIACO INTERNO (mm)	DIAMETRO ENDOPROTESI ILIACA (mm)	LUNGHEZZA CONTROLATERALE (cm)	MISURA RACCOMANDATA INTRODUTTORE (Fr)
PLC121000	10-11	12	10	12
PLC121200	10-11	12	12	12
PLC121400	10-11	12	14	12
PLC141000	12-13,5	14,5	10	12
PLC141200	12-13,5	14,5	12	12
PLC141400	12-13,5	14,5	14	12
PLC161000*	13,5-14,5	16	9,5	12
PLC161200*	13,5-14,5	16	11,5	12
PLC161400*	13,5-14,5	16	13,5	12
PLC181000*	14,5 - 16,5	18	9,5	12
PLC181200*	14,5 - 16,5	18	11,5	12
PLC181400*	14,5 - 16,5	18	13,5	12
PLC201000*	16,5-18,5	20	9,5	12
PLC201200*	16,5-18,5	20	11,5	12
PLC201400*	16,5-18,5	20	13,5	12
PLC231000*	18,5-21,5	23	10	14
PLC231200*	18,5-21,5	23	12	14
PLC231400*	18,5-21,5	23	14	14
PLC271000*	21,5-25,0	27	10	15
PLC271200*	21,5-25,0	27	12	15
PLC271400*	21,5-25,0	27	14	15

* N.B. - Tutte le controlaterali di grande diametro (16, 18, 20, 23 e 27 mm) possono essere usate come estensioni iliache.

Endoprotesi GORE® EXCLUDER® AAA

Estensione iliaca

NUMERO DI CATALOGO	DIAMETRO ILIACO INTERNO (mm)	DIAMETRO ENDOPROTESI (mm)	LUNGHEZZA ENDOPROTESI (cm)	MISURA RACCOMANDATA INTRODUTTORE (Fr)
PLL161007	8-9	10	7	12
PLL161207	10-11	12	7	12
PLL161407	12-13,5	14,5	7	12

Estensione aortica

NUMERO DI CATALOGO	DIAMETRO AORTICO INTERNO (mm)	DIAMETRO ENDOPROTESI (mm)	LUNGHEZZA ENDOPROTESI (cm)	MISURA RACCOMANDATA INTRODUTTORE (Fr)
PLA230300	19-21	23	3,3	16
PLA260300	22-23	26	3,3	16
PLA280300	24-26	28,5	3,3	16
PXA320400	27-29	32	4,5	17
PLA360400	30-32	36	4,5	18

Endoprotesi GORE® EXCLUDER® Iliac Branch

Componente con Branch Iliaco

NUMERO DI CATALOGO	DIAMETRO ARTERIA ILIACA ESTERNA (mm)	DIAMETRO ESTREMITÀ ILIACA (mm)	LUNGHEZZA COMPONENTE CON BRANCH ILIACO (cm)	MISURA RACCOMANDATA INTRODUTTORE (Fr)
CEB231010	6,5-9	10	10	16
CEB231210	10-11	12	10	16
CEB231410	12-13,5	14,5	10	16

Branch per Iliaca Interna

NUMERO DI CATALOGO	DIAMETRO ARTERIA ILIACA ESTERNA (mm)	DIAMETRO ESTREMITÀ ILIACA (mm)	LUNGHEZZA COMPONENTE BRANCH PER ILIACA INTERNA (cm)	MISURA RACCOMANDATA INTRODUTTORE (Fr x cm)
HGB161007	6,5-9	10	7	12 x 45
HGB161207	10-11	12	7	12 x 45
HGB161407	12-13,5	14,5	7	12 x 45

Accessori aortici

Introduttore GORE® DrySeal Flex

NUMERO DI CATALOGO	MISURA INTRO-DUTTORE (Fr)	DI MINIMO INTRODUTTORE (mm)	DE NOMINALE INTRODUTTORE (mm)	LUNGHEZZA UTILE (cm)
DSF1233	12	4,0	4,7	33
DSF1245	12	4,0	4,7	45
DSF1433	14	4,7	5,3	33
DSF1533	15	5,0	5,6	33
DSF1633	16	5,3	6,1	33
DSF1833	18	6,0	6,7	33
DSF2033	20	6,7	7,5	33
DSF2065	20	6,7	7,5	65
DSF2233	22	7,3	8,2	33
DSF2265	22	7,3	8,2	65
DSF2433	24	8,0	8,8	33
DSF2465	24	8,0	8,8	65
DSF2633	26	8,7	9,5	33
DSF2665	26	8,7	9,5	65

Catetere a palloncino GORE® Tri-Lobe

NUMERO DI CATALOGO	MISURA (Fr)	DIAMETRO INTERNO DEL VASO (mm)	LUNGHEZZA UTILE (cm)
BCM1634	18	16-34	104
BCL2645	18	26-42	104



W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

Flagstaff, AZ 86004

+65.67332882 (Asia Pacific)

00800.6334.4673 (Europe)

800.437.8181 (United States)

928.779.2771 (United States)

goremedical.com

Immagine in copertina: follow-up a due anni, primo uso clinico. Immagine per cortese concessione di Brian Peterson, MD., St. Anthony's Medical Center; St. Louis, Missouri.

I prodotti elencati potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati.
GORE®, C3®, EXCLUDER® e i design sono marchi di W. L. Gore & Associates.
© 2016-2017 W. L. Gore & Associates GmbH AV3308-IT5 OTTOBRE 2017